

Kontakt:

*Henrik Jørgensen
Sejrupvej 27
7323 Give
Tlf: +45 75736135
Mobil: +45 21756735
Mail: info@bovihoofcare.com*



Die Klauenpflegebox

*Bedienungsanleitung
und Ersatzteilkatalog*

www.bovihoofcare.dk

Die Klauenpflegebox Bedienungsanleitung und Ersatzteilkatalog



Danke, dass Sie sich für die Klauenpflegebox entschieden haben. Wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen diese Anleitung über den Gebrauch des Klauenpflegestandes durchzulesen, dann sind Sie auf gutem Wege Freude an Ihrer neuen Investition zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Henrik Hein Jørgensen

Funktionsbeschreibung:

Die Fixierungsbox ist ein transportables Werkzeug zur Vorbeugung und Behandlung von Klauenleiden bei Rindern sowie zur Fixierung von Tieren bei Tierarztbehandlungen.

Der Klauenpflegestand darf nur zu diesen Zwecken verwendet werden, der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden an Tieren oder Personen, wenn der Klauenpflegestand für andere Zwecke oder in anderer Weise als im Folgenden beschrieben, angewandt wird. Das Grundprinzip des Klauenpflegestandes ist es, dass man die Box über das Tier hinüber schiebt und nicht umgekehrt das Tier in die Box zieht. Das Tier kann durch die beiden Bauchgurte während der Arbeit gestützt werden und man kann, mit Hilfe von der Winde, die Beine einzeln anheben.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Die Arbeit mit lebenden Tieren bedarf immer großer Achtsamkeit, da die Tiere, bei plötzlichen Bewegungen und lauten Geräuschen, unerwartet reagieren können. Mit den neuen Arbeitsmethoden kann es notwendig sein, die Tiere an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen, bevor man die Arbeit beginnt.

Stellen Sie sicher, daß das Tier sicher im Klauenpflegestand fixiert ist, sodaß es sich nicht während der Arbeit losreißen oder austreten kann und dadurch sich selbst oder Personen schaden zufügt. Für den sicheren Gebrauch des Klauenpflegestandes ist eine Voraussetzung, daß das Tier in einem Selbstfang-Fressgitter gebunden ist – am besten ein Sicherheitsfressgitter oder Ähnliches. Das Fressgitter sollte so niedrig sein, dass das Tier sich wieder hinstellen kann, wenn es sich während der Arbeit hinlegen sollte.

Ebenso soll die Box, an gleicher Stelle wie das Tier, am Fressgitter befestigt werden. Die angebaute Sicherheitsschlösser müssen während der Arbeit geschlossen sein.

Beim Gebrauch von einem Winkelschleifer ist darauf zu achten, dass das Werkzeug weder das Tier, noch Personen verletzen kann.

Hinweise vor Inbetriebnahme:


Bevor der Klauenpflegestand in Gebrauch genommen wird, stellen sie sicher, dass die Box korrekt zusammengebaut ist, und alle Schrauben fest angezogen sind. Im weiteren ist sicherzustellen, dass die Bauchgurte, das Tauwerk und die Ketten sicher befestigt sind.

Schrauben sollten nach einigen Anwendungen nachgezogen werden.

Anwendung des Klauenpflegestandes:

Schritt 1 – Transport der Box:

Die Box wird über das Tier, dass im Fressgitter fixiert ist, hinüber geschoben. Die hintere Klappe ist dabei nach oben geschlagen, dies verbessert die Manövrierbarkeit unter engen Bedingungen und die Box lässt sich so leichter anheben.

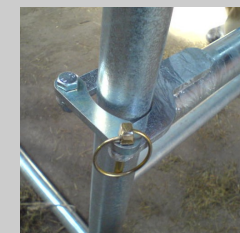

Achtung!

Während der Arbeit muss die Klappe in unterer Stellung durch zwei Sicherheitsstecker gesichert sein.

Schritt 2 – Befestigung der Box:

Die Box wird mit einer Kette am Fressgitter festgemacht, sodass die Box sich nicht verschieben kann, falls die Kuh unruhig werden sollte.



Schritt 3 – Anbringen der Bauchgurte :

Der vordere Gurt muss so weit vorne wie möglich angebracht werden. Es kann in einigen Fällen von Vorteil sein, den Gurt vor dem vorderen Stützrohr vorbei zu ziehen, um den Gurt so weit vorne wie möglich anbringen zu können.



Anwendung des Klauenpflegestandes:

Schritt 3 – Anbringen der Bauchgurte :

Das vordere Tau sollte nicht über dem Spalt zwischen der Ratsche und Rohr angebracht werden, da es sich beim Spannen festklemmen könnte.

Der hintere Gurt muss möglichst weit vorne angebracht werden.

Das Tau für den hinteren Gurt kann stufenlos an der seitlichen Winde festgemacht werden, indem man es beim Spannen über Kreuz laufen lässt. Man muss es also nicht unbedingt am Knoten befestigen.



Schritt 4 – Anheben der Kuh:

Die Bauchgurte werden mit der Ratsche an der rechten Seite gespannt.

Die Kuh sollte nur hinten angehoben werden und der vordere Gurt sollte nur leicht stützen!

Dadurch wird das Risiko, dass sich die Kuh beim Lösen der Gurte hinlegt, hinvermindert.



Schritt 5 – Anheben des Hinterbeins:

Das Tau wird mit Hilfe der Manschette an dem Bein der Kuh festgemacht und das Bein wird nun – so schnell wie möglich – durch Drehen an der Winde angehoben. Durch das rasche anheben kommt die Kuh schneller wieder zur Ruhe und es wird ein austreten vermieden. Sollte die Kuh noch nicht zur Ruhe kommen, werden die Bauchgurte noch weiter gespannt, bis die Kuh ruhig steht.

Die Kuh kann nun behandelt werden.



Schritt 5 - Anheben des Hinterbeins:

Hinterbeinhalter - mit Unterstützung.



Anwendung des Klauenpflegestandes:

Schritt 6 – Anheben des Vorderbeins:

Wichtig!: Bevor das vordere Bein angehoben wird, müssen beide Hinterbeine fixiert werden, um ein nach-vorne-treten während der Arbeit am Vorderbein, zu vermeiden. Dies wird durch Festbinden der Hinterbeine an den Hinteren senkrechten Stützen erreicht. (Siehe Bild).



Schritt 6 – Anheben des Vorderbeins:

Das Tau an der Winde wird durch den Haken an der vorderen Stütze gezogen und nach unten über durch die Fußstütze geführt, und die Manschette wird an dem Vorderbein befestigt.

So kann das vordere Bein mit der Winde angehoben werden.




Schritt 6 – Anheben des Vorderbeins:

Vorderbeinhalter mit Unterstützung



Cowcarebox

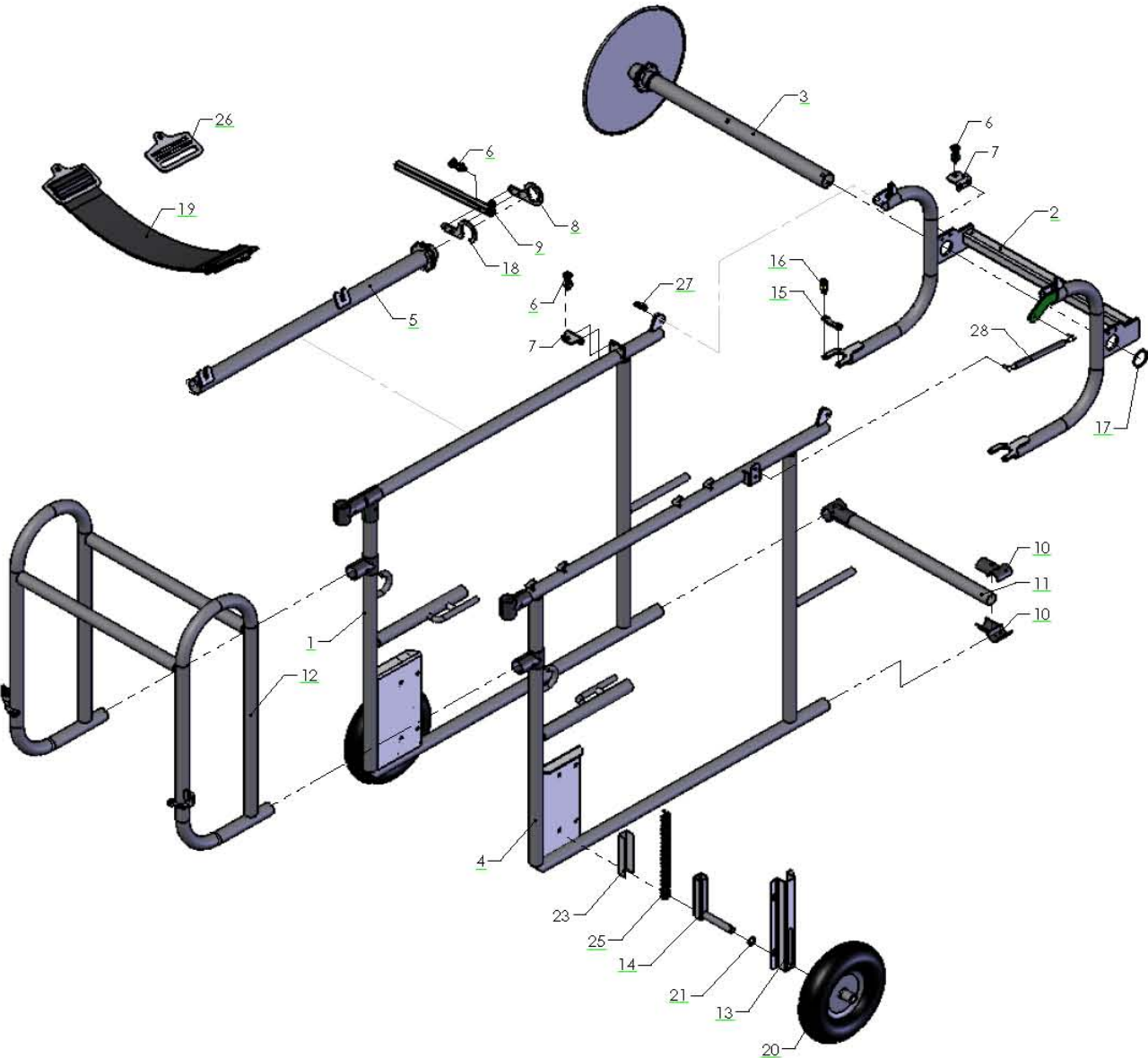

2006

Pos	Bestil nr.	Benævnelse	Description	Bezeichnung	Bemærkning
1	98700240	Side, højre			
2	98700310	Bagerste låge			
3	98700280	Spil			
4	98700620	Side, venstre			
5	98700810	Rør for sidespil			
6	98700960	Pal			
7	98700530	Holder for låsepæl på bagerste spil			
8	98700560	Holder for håndtag for sidespil			
9	98700590	Håndtag for spil			
10		Clamp 1/2"			
11	98700950	Tværrør for bagende			
12	98700660	Forreste bøjle			
13	98700680	Profil for hjulophæng			
14	98700710	Hjulophæng			
15	98700860	Lap for sikkerhedslås			
16	910990	Traktorringsplit	Split	Splint	ø10
17	98700910	Justerskive			
18	98700561	Holder for håndtag for sidespil			
19		Gjord for fixering			
20	500099	Hjul			
21	26497750	Skive	Washer	Scheibe	
23	98701010	Justerplade for hjulophæng			
25	500097	Fjeder	Spring	Feder	
26	98700940	Spænde til gjord			
27	14538700	Traktorringsplit	Split	Splint	ø8
28	850637	Gascylinder	Gas cylinder	Gas Zylinder	